

## LAVADOR DESINFECTOR



## TIVA 8 CON PUERTA / S DE BISAGRAS MANUALES BAJO EL MOSTRADOR

HASTA 4 niveles de lavado con una capacidad total de 8 cestas  
DIN, cámara de 175 litros

La lavadora TIVA 8 está equipada con una puerta de vidrio con bisagras manuales y es la más adecuada para clínicas y consultorios dentales. Se puede cargar con hasta 4 niveles de lavado con una gran variedad de carros de lavado y accesorios. Carros disponibles para cestas DIN, contenedores, equipos mini-invasivos, Kit de anestesia, botellas, zapatos y instrumentales manuales dentales.



**Tuttnauer**

## TIVA 8-1M

Cámara de 175 litros de  
diseño estrecho


Dimensiones (WxDxH mm) 600x650x860



## TIVA 8-WD-1M / TIVA 8-HS-1M

Cámara de 175 litros de diseño  
ancho

Dimensiones (WxDxHmm) 900x650x860

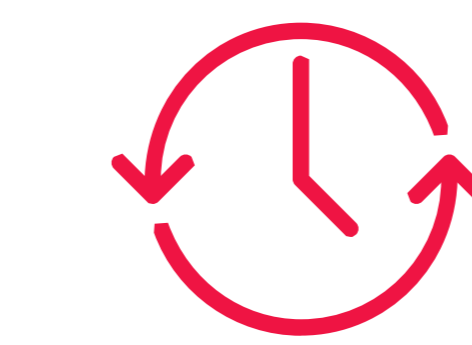


Ciclo Rápido

Configuraciones seleccionables:  
Gabinete de almacenamiento de  
detergente / depósito de precalentamiento para  
reducir el tiempo de ciclo + gabinete de detergente y  
conexión de agua desmineralizada.



**Tuttnauer**

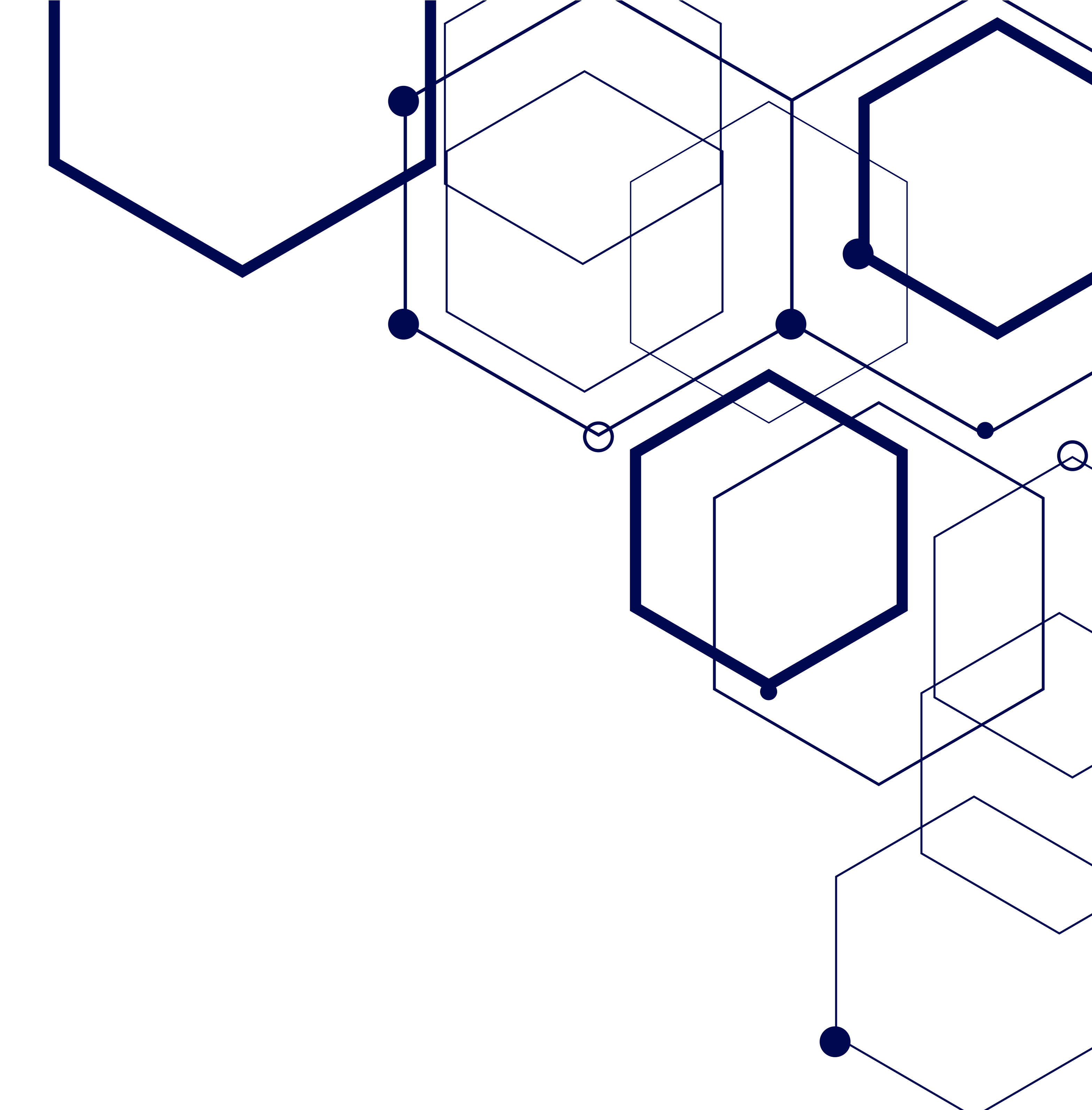

## CARACTERÍSTICAS:


- Puerta de cristal manual.
- Cámara de lavado fabricada en AISI 316L de alta calidad. Panel táctil con pantalla gráfica a color.
- Un total de 40 programas: procedimientos preestablecidos y programables.
- Prefiltro de secado de aire + filtro HEPA H14.
- Tanque precalentado para reducción del tiempo de ciclo (solo para modelo HS).
- 2 bombas dosificadoras con caudalímetro para detergentes ácidos y alcalinos (2 bombas adicionales opcionales).
- 3 elementos calefactores.
- Descalcificador de agua integrado. USB
- Impresora para documentación de datos.
- Condensador de vapor incorporado.

## OPCIONAL:

- Medidas de conductividad para comprobar la calidad de aclarado del agua antes de la fase de desinfección.
- Caldera de agua desmineralizada (solo para versión HS).
- Luz LED de la cámara: funciona durante la carga, descarga y ejecución del programa.
- Reconocimiento del tipo de carga del coche.
- Monitoreo continuo del brazo rociador de la tubería para garantizar que la carga esté actualmente lavada.
- Soporte de acero inoxidable para carga y descarga ergonómicas (no instalado debajo del mostrador)
- Conexión de agua: Descalcificador de agua fría, agua purificada (TIVA 8-1M, TIVA 8-WD-1M) Descalcificador de agua fría (TIVA 8-HS-1M)
- Informe gráfico de las fases de lavado incluyendo tiempo y temperatura




**Tuttnauer**

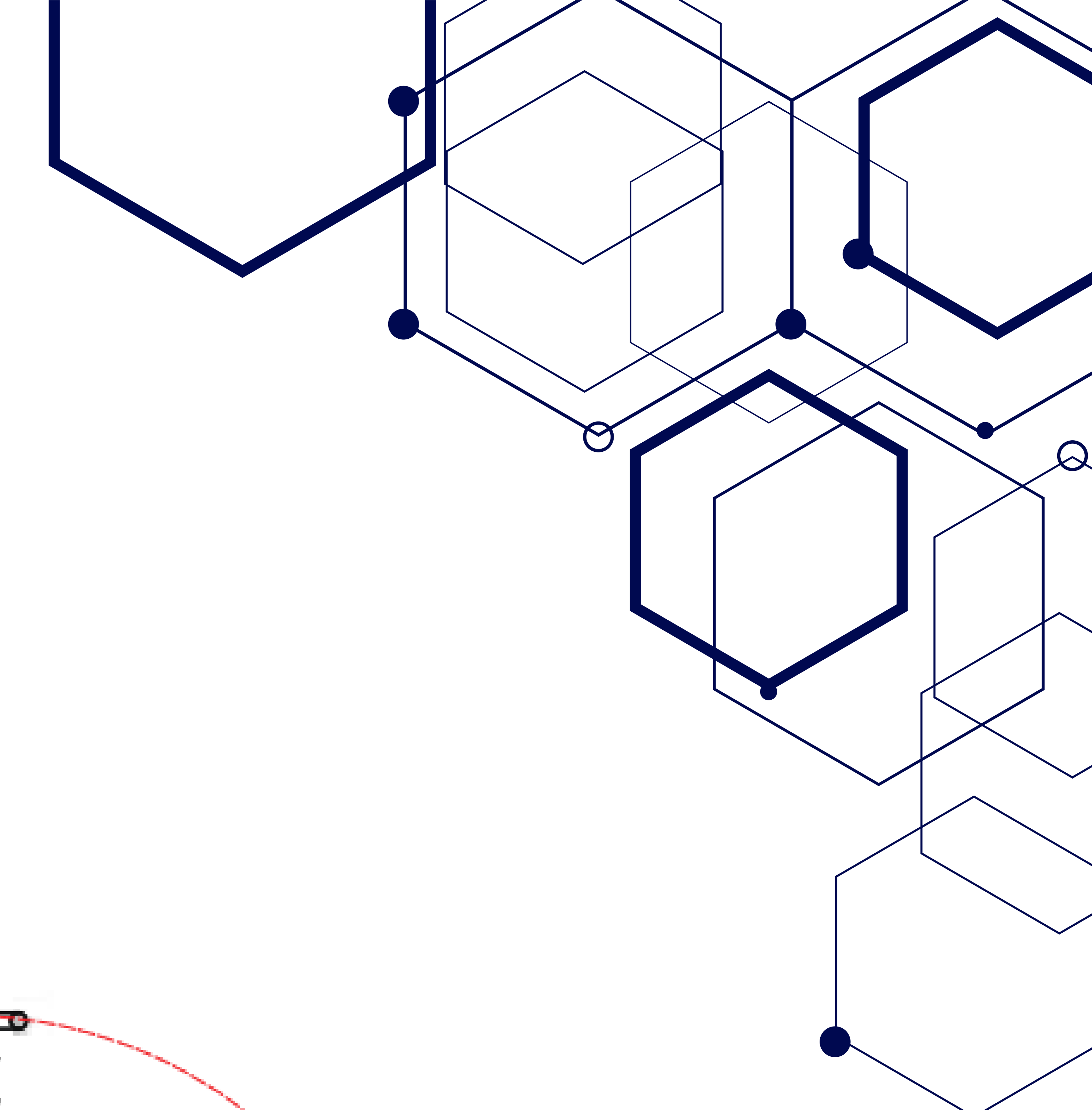



## TIVA 8-1M

Diseño estrecho de 60 cm

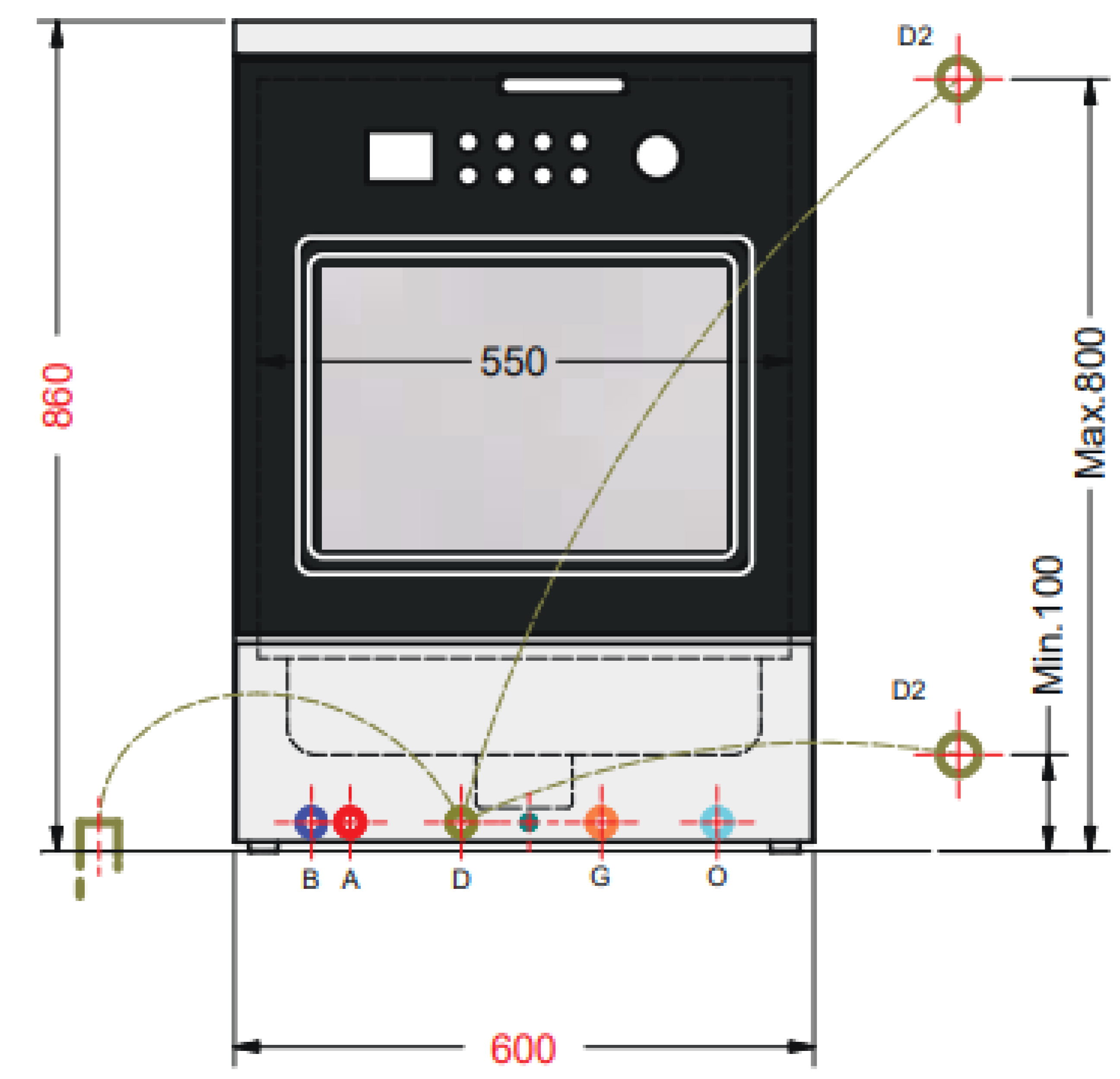

## TIVA 8-WD-1M / TIVA 8-HS-1M

Diseño de 90 cm de ancho

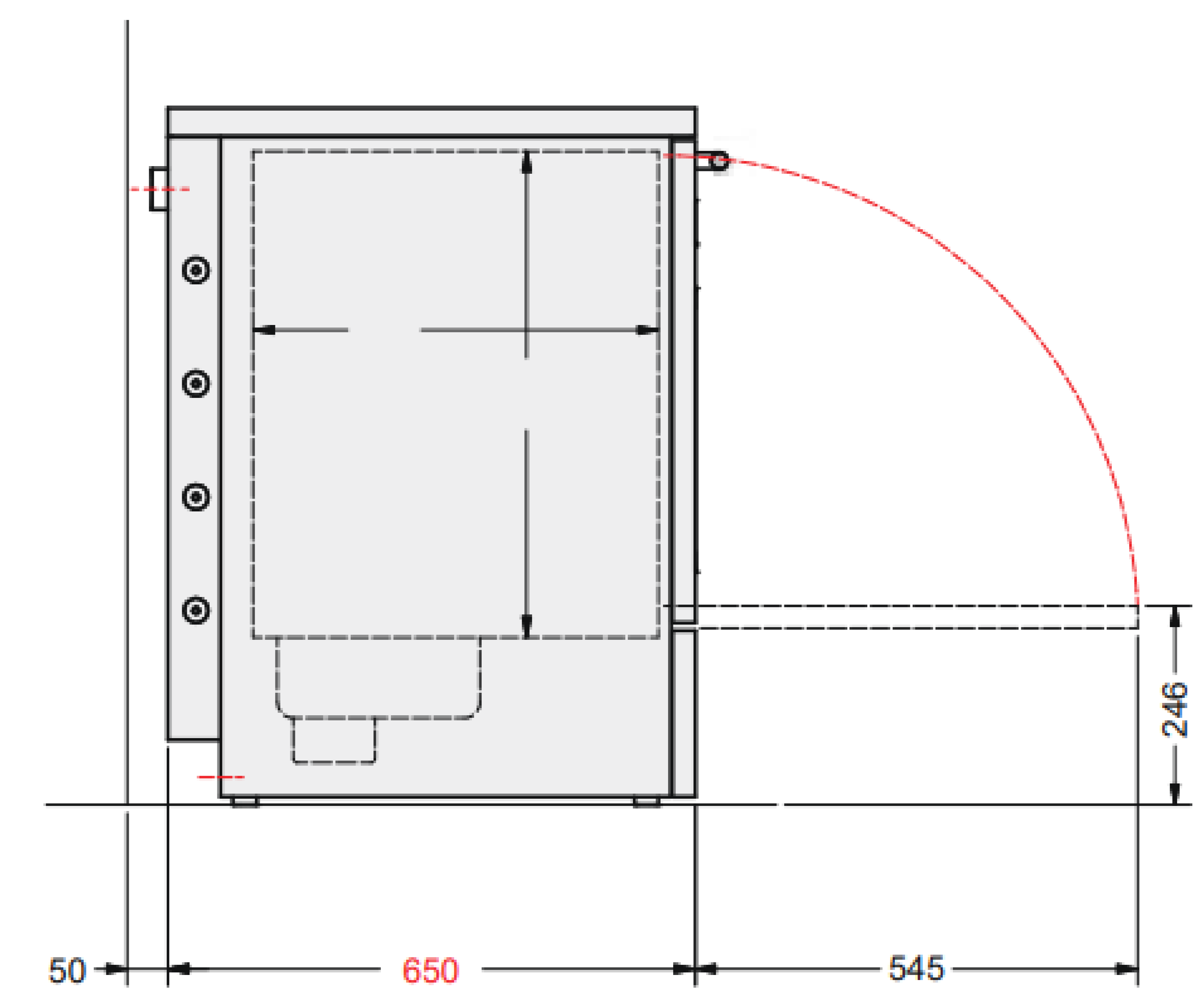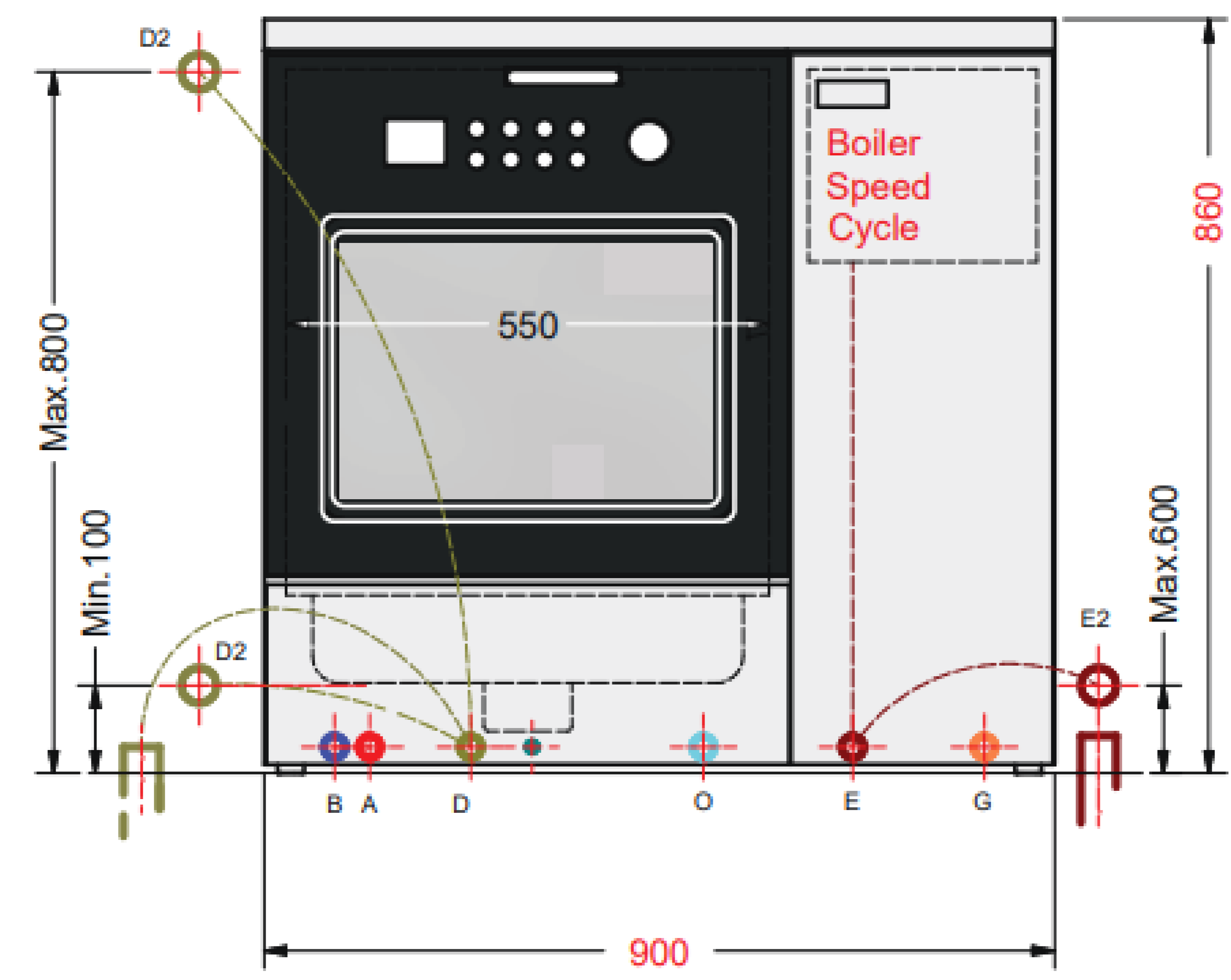

- A Conexión de agua caliente-3/4 "g (tubo de 1/2" g)
- B Conexión de agua fría-3/4 "g (tubo 1/2" g)
- D2 Desagüe dn 40 - conexión de manguera 25 mm (en la pared)
- G Conexión Eléctrica
- O Conexión de agua desmineralizada-1/2 "g
- E2 Desagüe dn 40 - conexión de manguera 25 mm (en la pared)