

EDAN



iM70

Monitor de paciente



Care for Health

EDAN

iM70

Monitor de paciente

12.1"

Máximo 11 ondas



Diseño sin ventilador




Modo nocturno



Tono de vibración



Grabadora térmica

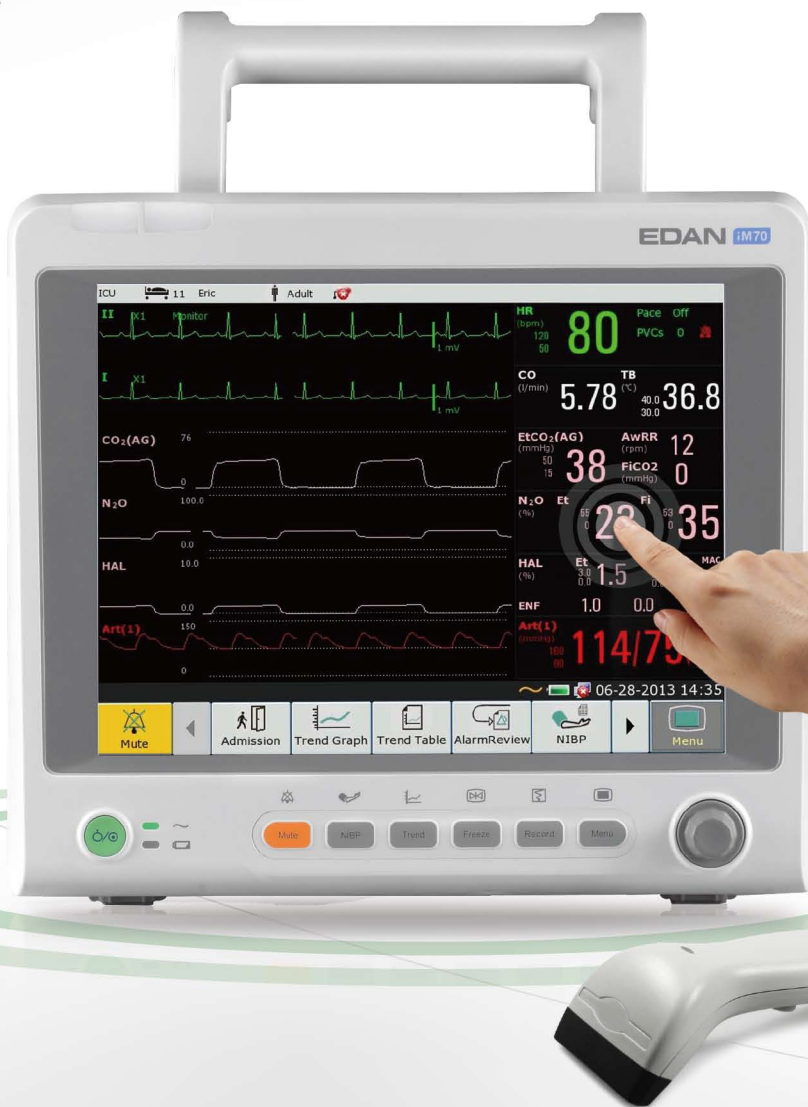

Parámetros estándar:

- ECG de 3 y 5 derivaciones, RESP, HR, EDAN SpO2, EDAN NIBP, PR, 2-TEMP

Parámetros opcionales:

- 2-IBP, C.O., Respironics CO2 (flujo principal y flujo lateral), Gas anestésico/O2 PHASEIN, Nellcor OxiMax™ SpO2, Omron® NIBP



iM70

LAN



MFM-CMS Visor web



XML



> Enfoque clínico

- iSEAP™ Algoritmo de ECG optimizado para detección de arritmia, detección de marcapasos y mediciones de HR
- iMAT™ Algoritmo de SpO2 con un destacado rendimiento de resistencia al movimiento y resistencia de perfusión baja
- iCUPS™ Algoritmo de NIBP optimizado para pacientes cardiacos, pacientes hipertensos y pacientes neonatales


> Modos de visualización múltiple



Visualización estándar




Letra grande

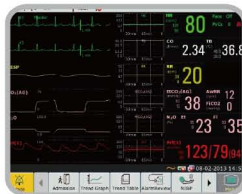

Visualización de tendencia



OxyCRG

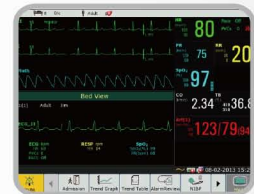

Múltiples camas

> Respirationics CO2 (Flujo principal/lateral) para pacientes intubados/no intubados



- Conectar y usar
- Diseño con tubo de deshumidificación en lugar de un colector de agua
- No es necesario calibrarlo de forma regular
- Tasa de muestreo bajo de 50 ml/min

> Gas anestésico/O2 PHASEIN (Flujo principal/lateral)



- Módulo Conectar y usar exclusivo para monitoreo de gas anestésico de flujo principal
- El diseño de la línea de muestreo sin humedad adecuado para todas las aplicaciones clínicas
- Un flujo bajo estable de 50mL/min para todo tipo de pacientes



Llamada a enfermera



Salida VGA



Sincronización y prueba del desfibrilador



Prueba de ESU



Gancho para riel de cama



Soporte móvil



Soporte de pared

Almacenamiento temporal interno:

1200

Medición de NIBP

120 h

Revisión de tendencia

60

Revisión de alarma

120 s

Forma de onda congelada



iM70

Monitor de paciente

EDAN Edan Instruments, Inc.

- 3/F-B Nanshan Medical Equipment Park, Nanshan Rd 1019#, shekou. Nanshan, Shenzhen, 518067 P.R. China
- Tel. +86-755-26898326 ▪ Fax +86-755-26898330 ▪ www.edan.com.cn ▪ Correo electrónico: info@edan.com.cn
- Todos los derechos reservados. Las características y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



CE 0123

SPA-PM-iM70-V1.2-20130904