

infant WARMER

A4051 Series



SB-A4051
REV. FEB

 **Advanced®**


CARACTERÍSTICAS:

- Dos opciones para la pantalla: Pantalla LED y LCD a color
- Dos opciones de cama: eléctrica y mesa manual (anti) Trendelenburg
- Precalentamiento inteligente
- Modo de piel controlado por servo o Manual
- Cajón de bypass para rayos X
- Sensor de temperatura ambiental
- Opcional para panel de gas con aspirador y/o unidad de reanimación
- Dos opciones de fototerapia: PT-2000 o PT-3000
- Dos opciones de calentamiento: calefactor radiante o colchón térmico
- Kit opcional para transporte, que incluye colchón térmico y baterías de 2 horas
- Opción CPAP de burbujeo
- Opción de Balanza y SpO2
- Tijera IV
- Soporte tipo E para dos cilindros
- Rueda de 5" con freno
- Multilenguaje: inglés / español / portugués.


OPCIONES:





Fototerapia SUPER LED, Térmica (CT)

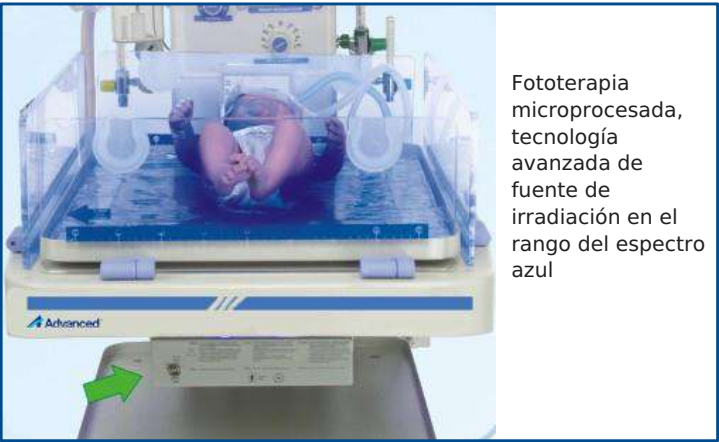

Fototerapia microprocesada, tecnología avanzada de fuente de irradiación en el rango del espectro azul

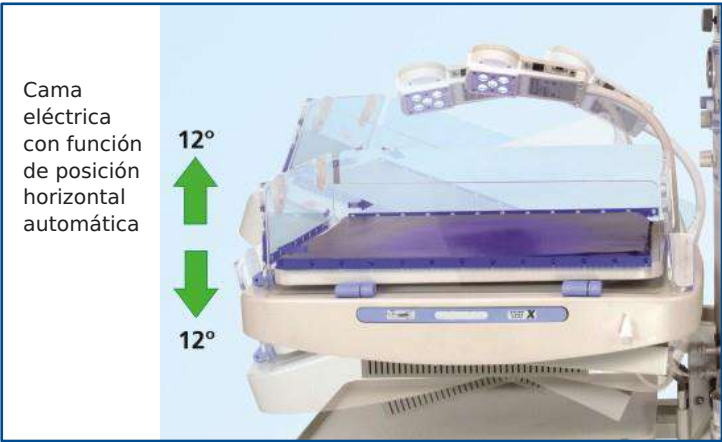

Cama eléctrica con función de posición horizontal automática

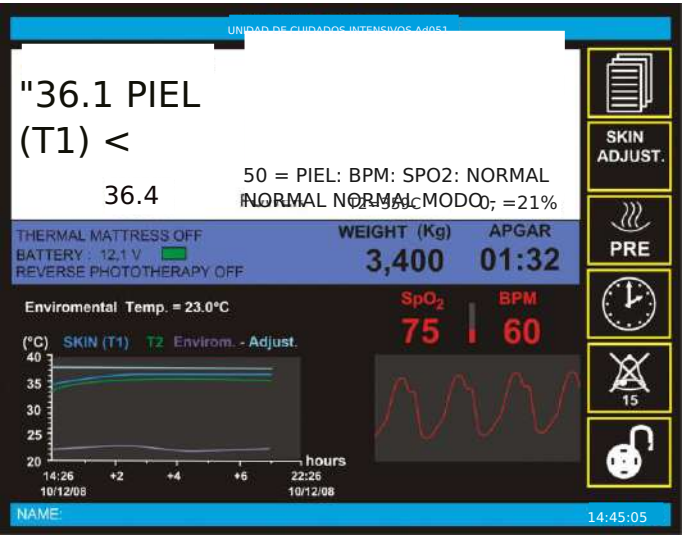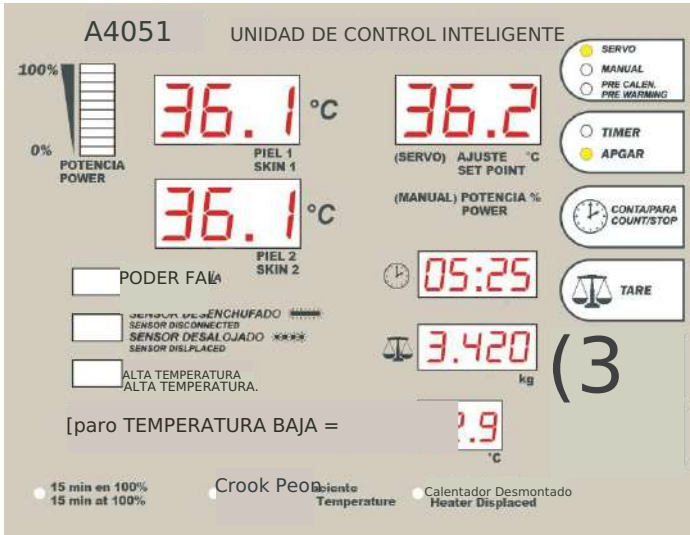

Bandeja de accesorios con dos cajones (A4051)



Bandeja de accesorios con dos estantes y cajón de bypass (A4051+)

A4051 SERIES CALENTADOR RADIANTE INFANTIL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	A4051 LED (7 segmentos)	MÓDULO DE GAS	
ESPECIFICACIONES FÍSICAS		MOLDE NIPLE DE ENTRADA-SALIDA O2	Rosca 9/16"- 18UNF
DIMENSIÓN	1119mm (L) 630mm (W) 2003mm (H)	MOLDE NIPLE DE ENTRADA-SALIDA DE AIRE	Rosca 3/4" - 16UNF
ALTURA DEL NIVEL DEL COLCHÓN	1000 mm	CARGAS MÁXIMAS	
RUEDAS	4 unidades (5")	PÓLEO DE IV	2 Kg
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS		ESTANTES AUXILIARES	10 Kg
ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE	127V U, 220/240V $\pm$ 5%	CAMA	7 Kg
FRECUENCIA	50/60 Hz	BANDEJA INTERMEDIA	7 Kg
PODER DE ENTRADA	800W	CLASIFICACIÓN	
CORRIENTE NOMINAL	7 A c/127V 4 A c/220/240 V	TIPO DE DESCARGA ELÉCTRICA	Tipo I
CORRIENTE DE FUGA	<300 mA	NIVEL DE CARGA ELÉCTRICA	Tipo de Aplicación BF
BATERÍA RECARGABLE (PANEL)	9V	Penetración de agua	
TOMA AUXILIAR	Potencia máx. 150W	NIVEL DE PROTECCIÓN	IPX0
FUSIBLES	Red 127V (10A- Tipo F) Red 220/240V (5A- F)	MODO DE FUNCIONAMIENTO	Continuo
FUNCIONES OPERACIONALES		CAMA DEL PACIENTE	
MODO DE PIEL		Manual, 7 posiciones, Trendelemburg / Anti-Trendelemburg	
SERVO-CONTROLADO	La temperatura deseada (ajuste punto) se ajusta y el sistema controles de calentamiento por irradiación para el la temperatura de la piel del paciente se mantiene igual al de la ajuste punto.	CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR	
MANUAL	De esta manera, el usuario ajusta el nivel de potencia del irradiante calor (del 0 al 100%) para el paciente calentamiento. El nivel de potencia de el calor irradiado se mantendrá constante tórrido con la posición de pie el temperatura de la piel del paciente.	Reflector radiante articulado $\pm$ 90°, luz LED auxiliar, panel de gas / respirador / aspirador manual, bandeja de accesorios de cama con dos cajones, giratoria bandeja de monitor del paciente, bandeja de rayos X, poste de suero, soporte para dos cilindros, ruedas con frenos, altura fija	
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL		OPCIONES	
UNIDAD DE CONTROL	Microprocesador	Sistema de Escala de Peso*	
TEMPERATURAS		Monitor Color 8,4"*	
RESOLUCIÓN DE LA DISPLAY DE TEMPERATURA	0.1°C	Cama eléctrica, ajuste continuo, función de reinicio*	
PRECISIÓN DE CONTROL	$\pm$ 0.2°C	Cama de fototerapia*	
AJUSTE DE TEMPERATURA	25.0°C Hasta 38.0°C	Colchón térmico*	
RANGO DE TEMPERATURA	20.0°C Hasta 45.0°C	Oxímetro de pulso SpO2*	
ALARMA S		Soporte ergonómico con pedales*	
ALARM SYSTEMS	Energía Fallo del calefactor irradiación	CPAP*	
	Nivel de batería de transporte (opcional)		
	Tiempo de inhibición de la alarma: 10 Min.		
	Modo manual: cada 15 minutos		
TEMPERATURA Y PIEL			
ALARM SENSORIAL	Temperatura alta +1.0°C Baja temperatura -1.0°C Fallo del sensor		
ALARMA DEL PULSO OXÍMETRO/ ALARMA MONITOR DE OXÍGENO*			
ALARMA DE MEZCLADOR/ ALARMA HUMIDIFICADOR*			

*Sólo para el modelo A4051+

Contáctenos para información adicional.

Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Contáctenos para información adicional

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166
Teléfono: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351
ventas@advanced-inst.com
www.advanced-inst.com