

Desarrollado por



CLIA
EXONERADO



Control Hemático

Análisis de hemoglobina y cálculo del hematocrito

Escanee aquí para ver



página web del producto

Dos resultados en una misma prueba.

Fácil de usar

No requiere calibración

Diseño de cubeta sin burbujas

EKF
Diagnostics

Control Hemático

Fácil de usar

- Instrucciones paso a paso en la pantalla
- Pantalla táctil retroiluminada
- Menú de idioma seleccionable por el usuario
- El soporte para cubetas de carga suave minimiza el riesgo de contaminación

Práctico y portátil

- Resultados de hemoglobina y hematocrito calculado a partir de una muestra, si la hemoglobina El valor es de 12 a 18 g/dL.
- Los resultados de la medición estarán disponibles después de 25 a 60 segundos. (dependiendo de la concentración)
- Sangre venosa, arterial o capilar
- Volumen de muestra de solo unos 8 µL
- El diseño de la microcubeta minimiza las burbujas de aire.
- De tamaño compacto y con un peso de tan solo 1,5 libras.
- No requiere mantenimiento, salvo limpieza. Autodiagnóstico.
- Batería recargable integrada (100 horas de funcionamiento)

Preciso y fiable

- Temperatura ambiente de funcionamiento: 59 - 104 °F
- Método fotométrico de metahemoglobina con azida
- Rango de medición lineal: 11-255 g/L (1,1-25,5 g/dL); 0,7-15,8 mmol/L
- Imprecisión: CV <1,5 %
- Rango de hematocrito: 36 - 53 %
- Calibrado según el método de referencia NCCLS
- Cubeta de control incluida

funciones de gestión de datos

- Interfaz bidireccional que utiliza el estándar de comunicación LIS2-A2.
- Almacena los resultados de 4000 pacientes.
- Conéctalo al PC mediante un cable conector USB.
- Hemo Control actualizable con funciones de gestión de datos (DM): identificación mediante código de barras de pacientes, operadores, lote de cubetas y materiales de control, recordatorio de control de calidad y función de bloqueo; además, almacena 500 resultados de control de calidad.

Número de catálogo

Nombre

3040-0010-0218

3040-7201-0099

0760-0102

0760-0104

- Control hematológico
- Paquete adicional - Hemo Control DM


- Licencia EKF Link
- EKF Link Lite



1 Recoger muestra de sangre.



2 Introduzca la microcubeta en el analizador.

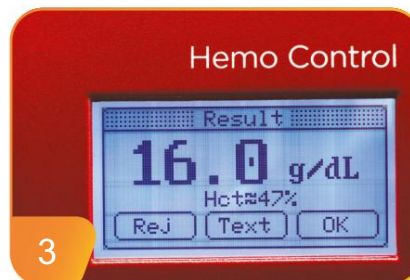

3 El resultado aparece en 25-60 segundos.



Fabricante
EKF-diagnostics GmbH
Ebendorfer Chaussee 3
39179 Barleben, Alemania
Tel.: +49 (0) 39203 511 0

Distribuido por
Representación local
EKF Diagnostics, Inc.
1261 North Main Street
Boerne, TX 78006
EE.UU.

Teléfono: 1-800-531-5535
Correo electrónico: techsupport@ekfdiagnostics.com
www.ekfusa.com